

**ITALIANO**

**IDENTIFICAZIONE DEI PRODOTTI**

Nome: Isotonac-3, Isotonac-4, Hemolynac-3, Hemolynac-3N, Hemolynac-5, Hemolynac-310, Hemolynac-510, Cleanac-3, Cleanac, Cleanac-710

**DESTINAZIONE D'USO**

Per solo uso diagnostico in vitro. Reagenti da utilizzare su contaglobuli NIHON KOHDEN in combinazione come da Tabella 1.

L'utilizzo di Isotonac-4, Hemolynac-310, Hemolynac-510 e Cleanac-710 è previsto solo per il sangue umano. Per quanto riguarda la destinazione d'uso, fare riferimento alla Tabella 2.

**CONSERVAZIONE E STABILITÀ DOPO PRIMA APERTURA.**

Conservare tra 1 e 30 °C. Installare ciascun reagente previa verifica dell'integrità della confezione e della validità del dispositivo. Una volta aperto il reagente può essere utilizzato sino ad esaurimento, entro la data indicata in Tabella 4. Utilizzare il tappo originale integro per richiudere la confezione in caso di temporanea sospensione all'uso fatta eccezione per Hemolynac-310, Hemolynac-510 e Cleanac-710. Richiudere senza forzare.

**COMPOSIZIONE**

Ingredienti attivi

Vedi Tabella 3

**AVVERTENZE**

Informazioni sull'etichettatura

Vedi Tabella 5.

Informazioni sullo smaltimento

I resti del prodotto, i rifiuti derivanti dalla sua utilizzazione ed i contenitori vuoti devono essere smaltiti in conformità alla legislazione vigente. I reflui dello strumento, come sostanze potenzialmente infette, devono essere manipolati con cautela e smaltiti in conformità alla legislazione vigente.

**CAMPIONE**

I reagenti sono stati realizzati per l'uso con campioni di sangue intero. Per le modalità di prelievo e di conservazione dei campioni consultare il Manuale Operativo dello strumento.

**PROCEDURA**

Per quanto riguarda le modalità di installazione dei reagenti, di avvinamento delle linee, e per le modalità di utilizzo dello strumento si rimanda alla consultazione del Manuale Operativo dello strumento. Si raccomanda, dopo l'installazione di un nuovo lotto di diluente o di lisante, di verificare il fondo (background), seguendo quanto indicato sul Manuale Operativo dello strumento. Operare alle temperature di utilizzo indicate nel Manuale Operativo dello strumento. Utilizzare ciascun prodotto nel suo imballo originale (non travasare). Operare in accordo alla buona prassi di laboratorio (GLP). Nel caso in cui i raccordi previsti in dotazione allo strumento non fossero compatibili, operare in accordo alle buone prassi di laboratorio (GLP), al fine di evitare qualsiasi tipo di contaminazione sia dall'ambiente esterno verso il dispositivo, sia dal dispositivo verso l'ambiente esterno.

**METODOLOGIA E CALCOLO DEL RISULTATO ANALITICO**

Per le informazioni relative ai principi di analisi su cui si basa la determinazione dei diversi parametri analitici ed alle modalità di calcolo dei risultati, si rimanda alla consultazione del Manuale Operativo dello strumento.

**CONTROLLO QUALITÀ INTERNO**

Verifica del background

Dopo aver avvinato le linee dello strumento, verificare il background (conteggio di fondo) secondo quanto riportato sul Manuale Operativo dello strumento, ed assicurarsi che i valori ottenuti rientrino, per ciascun parametro, nei limiti specificati sul Manuale Operativo. Qualora uno o più parametri non rientrassero nei suddetti limiti, procedere in conformità alle prescrizioni del fabbricante dello strumento. Se il problema fosse attribuibile ad uno dei reagenti, sostituire la confezione in uso con una integra e ripetere la verifica. Non procedere con le analisi fino a che i valori di background non sono accettabili.

Procedure di calibrazione e di verifica della calibrazione

Si raccomanda di verificare la calibrazione dello strumento nelle seguenti condizioni:

1. dopo la prima installazione dello strumento
2. almeno ogni sei mesi (o secondo quanto raccomandato dal fabbricante dello strumento, in caso di indicazioni più restrittive)
3. dopo un intervento tecnico ritenuto critico (sostituzione di componenti che possano influire sulle performance strumentali, upgrade del software, sostituzione completa dei reagenti)
4. nel caso in cui i dati del controllo qualità abbiano rilevato un cambiamento significativo dell'accuratezza della linea di base (drift), o non rientrino nei limiti di accettabilità prestabiliti
5. nel caso si sostituisca il lisante Hemolynac-3 con il lisante Hemolynac-3N e viceversa

Prima di eseguire le procedure di calibrazione si raccomanda di effettuare una manutenzione preventiva (verifica dell'accuratezza e della precisione della linea di base: rif. documento CLSI H26-A2). La calibrazione e la verifica della calibrazione dello strumento devono essere eseguite utilizzando materiale opportuno (campioni di sangue fresco intero i cui valori siano stati assegnati con metodi manuali di riferimento o opportuno calibratore), seguendo le indicazioni riportate sul Manuale Operativo dello strumento. Nel caso fosse necessario calibrare lo strumento, si raccomanda di eseguire la verifica della calibrazione immediatamente dopo la calibrazione, seguendo quanto indicato sul Manuale Operativo dello strumento (si rimanda inoltre al documento CLSI H26-A2).

Procedure giornaliere di controllo qualità

Al fine di garantire l'accuratezza e l'affidabilità dei risultati ottenuti, si raccomanda di eseguire le procedure di controllo qualità conformemente a quanto riportato sul Manuale Operativo dello strumento, utilizzando appropriato materiale di controllo (campioni di sangue fresco intero di pazienti o opportuno sangue di controllo stabilizzato), subito prima, durante e subito dopo ciascuna sequenza di analisi. Si raccomanda di utilizzare due differenti livelli di sangue di controllo stabilizzato (far riferimento al documento CLSI H26-A2).

**BIBLIOGRAFIA**

1. Validation, Verification, and Quality Assurance of Automated Hematology Analyzers; Approved Standard – Second Edition, CLSI Document H26-A2, Vol. 30, No. 14, 2010.
2. Health Care Financing Administration. Clinical Laboratory Improvement Amendments of 1998; Final Rule. Federal Register, Vol. 57, [42 CFR § 493.1217, 493.1218], 1992.

Data di emissione: 4 Gennaio 2017



**NIHON KOHDEN FIRENZE S.r.l**

Via Torta, 72/74 - 50019 Sesto Fiorentino-Firenze, Italy  
Tel +39 055 3045 1 - Fax +39 055 308548



**ENGLISH**

**PRODUCT IDENTIFICATION**

name: Isotonac-3, Isotonac-4, Hemolynac-3, Hemolynac-3N, Hemolynac-5, Hemolynac-310, Hemolynac-510, Cleanac-3, Cleanac, Cleanac-710

**INTENDED USE**

For in vitro diagnostic use only. Reagents to be used on NIHON KOHDEN analyzers in combination as indicated in Table 1.

Isotonac-4, Hemolynac-310, Hemolynac-510 and Cleanac-710 are only intended for human blood. In regard to the intended use, please refer to Table 2.

**STORAGE AND SHELF LIFE AFTER FIRST OPENING**

Store between 1 and 30 °C. Check reagent integrity and expiry date, before installing the device. Once opened, the reagent must be used within the expiry date indicated in Table 4. When not in use, use the original cap to close the container except Hemolynac-310, Hemolynac-510 and Cleanac-710. Do not force.

**COMPOSITION**

Active ingredients

Ref. Table 3

**WARNING AND PRECAUTIONS**

Labelling information

Ref. Table 5.

Disposal information

Unused product and emptied containers should be disposed in accordance with local environmental regulations. Instrument wastes, as potential biohazardous, must be handled with care and disposed in accordance with local environmental regulations.

**SPECIMEN**

The devices have been designed to be used with whole blood samples. Refer to Operator's Manual for sample collection and storage conditions.

**PROCEDURE**

Refer to Operator's Manual for reagents installation and priming, and for instrument operation. When installing a new batch of diluent or lysing reagent, check the background according to Operator's Manual. Refer to Operator's Manual for working temperature.

Use each reagent in its own packaging (do not transfer). Follow GLP recommendations. If the instrument connections were not compatible, work according to Good Laboratory Practice (GLP), in order to avoid any kind of contamination, either from external environment to the device, or from the device to the external environment.

**METHODOLOGY AND CALCULATION OF ANALYTICAL RESULTS**

Refer to Operator's Manual for information on methodology and calculation of analytical results.

**INTERNAL QUALITY CONTROL**

Background verification

Before running testing samples check background count according to Operator's Manual, and verify that all the values for each parameter are within Operator's Manual limits. If not, follow Operator's Manual prescriptions. In case of problems attributed to one of the reagents, install a new unit of reagent and verify the background again. Do not run testing samples until the background is within the specified limits.

Calibration and calibration verification procedures

Instrument calibration should be verified in the following conditions:

1. after first installation
  2. at least every six months (or according to manufacturer's requirements for calibration frequency, if more stringent)
  3. after a major repair or a major change (replacement of critical parts that may influence test performance, software upgrade, complete change of reagents)
  4. when quality control data reflect a significant change of baseline accuracy (drift), or an out-of-control condition
  5. in case of replacement of the lysing reagent Hemolynac-3 with the lysing reagent Hemolynac-3N and vice versa
- Calibration procedures should be preceded by a preventive maintenance (verification of baseline accuracy and precision: ref. CLSI document H26-A2). Calibration and calibration verification must be performed using appropriate calibration material (fresh whole blood samples which have been analyzed by reference methods, or appropriate calibrator), following Operator's Manual prescriptions. When calibration is required, verify instrument calibration immediately after calibrating, according to Operator's Manual instructions (refer also to CLSI document H26-A2).

Daily Quality Control Procedures

In order to assure the accuracy and reliability of test results, it is recommended to perform quality control procedures, according to Operator's Manual instructions, using appropriate control material (retained patient specimens or stabilized control blood), immediately before, during, or immediately after each analysis run (intended as an analysis sequence). It is recommended to run two different levels of stabilized control blood (refer to CLSI document H26-A2).

**BIBLIOGRAPHY**

1. Validation, Verification, and Quality Assurance of Automated Hematology Analyzers; Approved Standard – Second Edition, CLSI Document H26-A2, Vol. 30, No. 14, 2010.
2. Health Care Financing Administration. Clinical Laboratory Improvement Amendments of 1998; Final Rule. Federal Register, Vol. 57, [42 CFR § 493.1217, 493.1218], 1992.

Date of issue: 4 January 2017



**ESPAÑOL**

**IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO**

Nombre: Isotonac-3, Isotonac-4, Hemolynac-3, Hemolynac-3N, Hemolynac-5, Hemolynac-310, Hemolynac-510, Cleanac-3, Cleanac, Cleanac-710

**USO PREVISTO**

Únicamente para uso in vitro. Reactivos para su uso en analizadores NIHON KOHDEN con las combinaciones que se indican en la Tabla 1. Isotonac-4, Hemolynac-310, Hemolynac-510 y Cleanac-710 se han concebido únicamente para su uso con sangre humana. En referencia a su uso previsto, véase la Tabla 2.

**ALMACENAMIENTO Y PERIODO DE VALIDEZ TRAS LA PRIMERA APERTURA**

Almacenar entre 1 °C y 30 °C. Comprobar la integridad de los reactivos y su fecha de caducidad antes de instalar el dispositivo. Una vez abierto, el reactivo debe usarse antes de la fecha de caducidad que se indica en la Tabla 4. Cuando no se use, cerrar el contenedor con la tapa original, excepto en el caso de Hemolynac-310, Hemolynac-510 y Cleanac-710. No forzar.

**COMPONENTES**

Ingredientes activos

Ref. Tabla 3

**ADVERTENCIAS**

Informaciones en las etiquetas

Véase Tabla 5.

Informaciones sobre su eliminación

Los restos del producto, los desechos derivados de su utilización y los recipientes vacíos tienen que ser eliminados respetando las leyes vigentes. Los residuos del instrumento, como las sustancias potencialmente infectas, tienen que ser manipulados con cautela y eliminados en conformidad con las leyes vigentes.

**MUESTRA**

Los reactivos han sido realizados para su uso con muestras de sangre entera. Para las modalidades de toma y de conservación de las muestras consultar el Manual Operativo del instrumento.

**PROCEDIMIENTO**

Por lo que se refiere a las modalidades de instalación de los reactivos, de aclarado de las líneas, y para las modalidades de utilización del instrumento se recomienda consultar el Manual Operativo del instrumento. Se aconseja, después de la instalación de un nuevo lote de diluyente o de lixante, verificar el fondo (background), siguiendo lo que se indica en el Manual Operativo del instrumento. Operar con las temperaturas de utilización indicadas en el Manual Operativo del instrumento.

Utilizar todos los productos en sus embalajes originales (no transvasar). Operar de acuerdo con las buenas reglas de laboratorio (GLP). En el caso de que los empalmes previstos en dotación con el instrumento no fueran compatibles, actuar de acuerdo con las buenas reglas de laboratorio (GLP), con el fin de evitar cualquier tipo de contaminación tanto del ambiente exterior hacia el dispositivo, como del dispositivo hacia el ambiente exterior.

**METODOLOGÍA Y CÁLCULO DEL RESULTADO ANALÍTICO**

Para las informaciones relativas a los principios de análisis sobre los que se basa la determinación de los distintos parámetros analíticos y a las modalidades de cálculo de los resultados, se invita a consultar el Manual Operativo del instrumento.

**CONTROL DE CALIDAD INTERNO**

Verificación del background

Después de haber aclarado las líneas del instrumento, verificar el background (cómputo de fondo) según lo indicado en el Manual Operativo del instrumento, y asegurarse de que los valores obtenidos para cada parámetro se encuentren dentro de los límites especificados en el Manual Operativo. En caso de que uno o varios parámetros no se encontraran dentro de dichos límites, proceder en conformidad con las indicaciones del fabricante del instrumento. Si el problema puede atribuirse a uno de los reactivos, sustituir el envase en uso con otro íntegro y repetir la verificación. No llevar a cabo los análisis hasta que los valores de background no sean aceptables.

Llevar a cabo el calibrado y la verificación del calibrado

Se aconseja verificar el calibrado del instrumento en las siguientes condiciones:

1. después de la primera instalación del instrumento
2. por lo menos cada seis meses (o según lo aconsejado por el fabricante del instrumento, en caso de indicaciones más restrictivas)
3. después de una intervención técnica considerada crítica (sustitución de componentes que pudieran influir en las prestaciones instrumentales, upgrade del software, sustitución completa de los reactivos).
4. en el caso de que los datos del control de calidad hubieran detectado un cambio significativo en la perfección de la línea de base (drift), o no entren dentro de los límites de aceptabilidad pre-establecidos.
5. después de la sustitución de lo lixante Hemolynac-3 con lo lixante Hemolynac-3N y viceversa

Antes de llevar a cabo los procedimientos de calibrado, se aconseja efectuar las operaciones de mantenimiento preventivo (verificación de la perfección y de la precisión de la línea de base: ref. documento CLSI H26-A2). El calibrado y la verificación del calibrado del instrumento tienen que ser efectuados utilizando material adecuado (muestras de sangre fresca entera cuyos valores hayan sido asignados con métodos manuales de referencia u oportuno calibrador), siguiendo las indicaciones que se dan en el Manual Operativo del instrumento. En caso de que fuera necesario calibrar el instrumento, se aconseja llevar a cabo la verificación del calibrado inmediatamente después del calibrado mismo, siguiendo todo lo que se indica en el Manual Operativo del instrumento (se aconseja consultar también el documento CLSI H26-A2).

Procedimientos diarios de control de la calidad

Con el objetivo de garantizar la perfección y la fiabilidad de los resultados obtenidos, se recomienda llevar a cabo los procedimientos de control de la calidad conformemente con lo indicado en el Manual Operativo del instrumento, utilizando material de control adecuado (muestras de sangre fresca entera de pacientes o sangre de control estabilizada adecuada), inmediatamente antes, durante e inmediatamente después de cada secuencia de análisis. Se aconseja utilizar dos niveles diferentes de sangre de control estabilizada (se remite al documento CLSI H26-A2)

**BIBLIOGRAFIA**

1. Validation, Verification, and Quality Assurance of Automated Hematology Analyzers; Approved Standard – Second Edition, CLSI Document H26-A2, Vol. 30, No. 14, 2010.
2. Health Care Financing Administration. Clinical Laboratory Improvement Amendments of 1998; Final Rule. Federal Register, Vol. 57, [42 CFR § 493.1217, 493.1218], 1992.

Fecha de publicación: 4 de enero de 2017



**DEUTSCH**

**PRODUKTIDENTIFIKATION**

Name: Isotonac-3, Isotonac-4, Hemolynac-3, Hemolynac-3N, Hemolynac-5, Hemolynac-310, Hemolynac-510, Cleanac-3, Cleanac, Cleanac-710

**ZWECKBESTIMMUNG**

Nur zur In-vitro-Diagnose. Reagenzien zur Verwendung mit NIHON KOHDEN-Analysegeräten in der in Tabelle 1 angegebenen Kombination. Isotonac-4, Hemolynac-310, Hemolynac-510 und Cleanac-710 sind nur für menschliches Blut bestimmt. Beachten Sie hinsichtlich der Zweckbestimmung Tabelle 2.

**LAGERUNG UND HALTBARKEIT NACH DEM ÖFFNEN**

Bei Temperaturen zwischen 1 und 30 °C lagern. Vor dem Installieren des Geräts Unversehrtheit und Haltbarkeitsdatum überprüfen. Nach dem Öffnen muss das Reagens innerhalb der in Tabelle 4 angegebenen Frist verbraucht werden. Wenn das Reagens nicht gebraucht wird, mit dem Originaldeckel verschließen (gilt nicht für Hemolynac-310, Hemolynac-510 und Cleanac-710). Keine Kraft aufwenden.

**ZUSAMMENSETZUNG**

Aktive Inhaltsstoffe

Ref. Tab. 3

**HINWEISE**

Informationen zur Etikettierung

Siehe Tabelle 5.

Informationen zur Entsorgung

Produktreste, bei der Verwendung entstehende Abfälle und leere Behälter müssen entsprechend den geltenden Vorschriften entsorgt werden. Die möglicherweise infizierten Abfallflüssigkeiten aus dem Gerät müssen mit Vorsicht und entsprechend den jeweils geltenden Vorschriften behandelt werden.

**PROBEN**

Die Reagenzmittel sind zur Verwendung bei vollständigen Blutproben konzipiert. Was die Blutentnahme und die Aufbewahrung der Blutproben anbetrifft, so ist die Gebrauchsanweisung des Blutbildanalysegerätes zu Rate zu ziehen.

**VORGEHENSWEISE**

Anweisungen und Hinweise zum Anschluss der Reagenzmittel an das Blutbildanalysegerät, zum Anschluss der Abfallflüssigkeitsbehälter und zur detaillierten Anwendung des Gerätes finden Sie in der Gebrauchsanweisung zu Ihrem Blutbildanalysegerät. Bitte beachten Sie, dass nach dem Anschluss einer neuen Lot-Nummer des Reagenzmittels der so genannte Background kontrolliert werden muss, d.h. dass mit Hilfe einer Leermessung ohne Blutprobe der Anteil des Reagenzmittels am Messergebnis festgestellt werden muss. Hinweise zur Durchführung der Background-Messung finden Sie in der Gebrauchsanweisung zu Ihrem Blutbildanalysegerät. Bitte beachten Sie auch die entsprechenden Angaben zu den Betriebsbedingungen (Temperaturbereich). Jedes Produkt nur in der Originalverpackung benutzen und nicht in andere Behälter umfüllen. In Übereinstimmung mit den allgemeinen Laborregeln arbeiten. Sollten die dem Gerät beiliegenden Verbindungsstücke nicht passen, befolgen Sie die allgemeinen Laborregeln, um so jede Art von Verunreinigung, sowohl von außen auf das Gerät als auch vom Gerät auf die äußere Umgebung zu vermeiden.

**ANWENDUNGSMETHODE UND BERECHNUNG DER ANALYTISCHEN RESULTATE**

Für Informationen hinsichtlich der Analyseprinzipien, auf denen die Bestimmung der unterschiedlichen analytischen Kriterien basiert, und hinsichtlich der Berechnungsweise der Analysenergebnisse verweisen wir auf die Gebrauchsanweisung des Blutbildanalysegerätes.

**INTERNE QUALITÄTSKONTROLLE**

Überprüfung des Backgrounds

Nach dem Anschluss einer neuen Lot-Nummer des Reagenzmittels muss, wie in der Gebrauchsanweisung angegeben, der Background (die Basiszählung) überprüft werden um sicherstellen, dass die hier festgestellten Werte für jeden einzelnen Parameter innerhalb der in der Gebrauchsanweisung festgelegten Ober- bzw. Untergrenzen liegen. Falls ein Wert oder mehrere Werte außerhalb dieses Bereiches liegen sollte, befolgen Sie die für diesen Fall geltenden Vorschriften des Geräteherstellers. Sollte das Problem auf das Reagenzmittel zurückzuführen sein, ersetzen Sie die schon geöffnete Packung durch eine neue und wiederholen Sie den Kontrollvorgang. Beginnen Sie nicht mit der Analyse von Blutproben, solange die Background-Werte nicht innerhalb des vorgeschriebenen Bereiches liegen.

Vorgehensweise zur Kalibrierung und zur Überprüfung der Kalibrierung

Die Kalibrierung des Blutbildanalysegerätes ist in den folgenden Situationen ratsam:

1. Nach der Erstinstallation des Gerätes
2. Mindestens alle sechs Monate (oder je nach Auflage des Geräteherstellers, falls diese strenger sind)
3. Nach einem als kritisch eingestuften technischen Eingriff (Austausch von Komponenten, die die Geräteleistung beeinträchtigen könnten, Upgrade von Software, vollständiger Austausch der Reagenzmittel)
4. Falls die Qualitätskontrolldaten eine auffallende Abweichung in der Genauigkeit der Basislinie (Drift) anzeigen oder nicht innerhalb der im voraus festgelegten Toleranzwerte liegen
5. im Falle des Austauschs des Reagenzmittels Hemolynac-3 durch das Reagenzmittel Hemolynac-3N und umgekehrt.

Vor Beginn der Kalibrierung sollte man einige vorbeugende Wartungsmaßnahmen durchführen (Kontrolle von Präzision und Genauigkeit der Basislinie: siehe Vorgabe CLSI H26-A2). Die Kalibrierung und die Überprüfung der Kalibrierung müssen mit Hilfe geeigneter Kontrollproben stattfinden (vollständige Nativblut-Proben, deren Werte mit manuellen Vergleichsmethoden oder mit einem geeigneten Kalibriergerät ermittelt werden). Bitte befolgen Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung. Nachdem das Gerät kalibriert wurde empfehlen wir, diese Kalibrierung sofort zu überprüfen. Folgen Sie dazu den Hinweisen in der Gebrauchsanweisung und der Vorgabe CLSI H26-A2.

Tägliche Maßnahmen zur Qualitätskontrolle

Um für Zuverlässigkeit und Präzision der Messergebnisse garantieren zu können empfehlen wir, die in der Gebrauchsanweisung angegebenen Maßnahmen zur Qualitätskontrolle exakt zu befolgen. Benutzen Sie nur geeignetes Kontrollmaterial (vollständiges Nativblut von Patienten oder entsprechend geeignetes, stabilisiertes Kontrollblut) unmittelbar vor, während und unmittelbar nach der Analyse. Es wird empfohlen, zwei verschiedene Stufen stabilisierten Kontrollbluts zu verwenden (siehe CLSI-Dokument H26-A2).

**BIBLIOGRAPHIE**

1. Validation, Verification, and Quality Assurance of Automated Hematology Analyzers; Approved Standard – Second Edition, CLSI Document H26-A2, Vol. 30, No. 14, 2010.
2. Health Care Financing Administration. Clinical Laboratory Improvement Amendments of 1998; Final Rule. Federal Register, Vol. 57, [42 CFR § 493.1217, 493.1218], 1992.

Ausgabe: 4. Januar 2017



**NIHON KOHDEN FIRENZE S.r.l**  
Via Torta, 72/74 - 50019 Sesto Fiorentino-Firenze, Italy  
Tel +39 055 3045 1 - Fax +39 055 308548



**FRANÇAIS**

**IDENTIFICATION DU PRODUIT**

Nom : Isotonac-3, Isotonac-4, Hemolynac-3, Hemolynac-3N, Hemolynac-5, Hemolynac-310, Hemolynac-510, Cleanac-3, Cleanac, Cleanac-710

**USAGE PRÉVU**

Destiné à un usage de diagnostic in vitro uniquement. Réactifs à utiliser sur des analyseurs NIHON KOHDEN selon les combinaisons indiquées au Tableau 1. Isotonac-4, Hemolynac-310, Hemolynac-510 et Cleanac-710 sont conçus uniquement pour le sang humain. En ce qui concerne l'usage prévu, veuillez vous référer au Tableau 2.

**STOCKAGE ET CONSERVATION APRÈS LA PREMIÈRE OUVERTURE**

Stocker entre 1 et 30 °C. Contrôler l'intégrité du réactif et la date de péremption, avant installation de l'appareil. Une fois ouvert, le réactif doit être utilisé avant la date de péremption indiquée au Tableau 4. Hors utilisation, fermer le conteneur avec le capuchon d'origine, excepté pour Hemolynac-310, Hemolynac-510 et Cleanac-710. Ne pas forcer.

**COMPOSITION**

Principes actifs

Réf. Tableau 3

**AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS**

Information de marquage

Réf. Tableau 5.

Mise au rebut

Les produits inutilisés et les récipients vidés doivent être traités selon les règlements environnementaux locaux. Les déchets des instruments, potentiellement infectieux d'un point de vue de contamination biologique, doivent être manipulés avec soin et traités selon les règlements environnementaux locaux.

**ECHANTILLON**

Les réactifs ont été conçus pour être utilisés avec des échantillons de sang total. Se référer au Manuel d'utilisation pour les conditions de prélèvement et de stockage.

**PROCEDURE**

Se référer au Manuel d'utilisation pour l'installation et l'amorçage des réactifs. Vérifier le bruit de fond selon le Manuel d'utilisation en installant un nouveau réactif diluant ou lysant.

Se référer au Manuel d'utilisation pour travailler à la bonne température. Utiliser chaque réactif dans son propre emballage (transfert interdit). Suivre les recommandations du guide des bonnes pratiques de laboratoire. S'assurer que les raccordements de l'instrument sont conformes au Manuel d'utilisation afin d'éviter toute contamination de l'environnement externe à l'équipement, ou à partir de l'équipement vers l'environnement externe.

**METHODOLOGIE ET INTERPRETATION DES RESULTATS ANALYTIQUES**

Se référer au Manuel d'utilisation pour la méthodologie et l'interprétation des résultats analytiques.

**CONTROLE DE QUALITE INTERNE**

Vérification du bruit de fond

Avant d'effectuer le passage de contrôles témoins selon le Manuel d'utilisation, vérifier que toutes les valeurs de bruit de fond pour chaque paramètre sont dans les limites acceptables (cf. Manuel d'utilisation). En cas de valeurs non conformes, suivre les prescriptions du Manuel d'utilisation. En cas de problèmes attribués à un des réactifs, installer un nouveau réactif et vérifier le bruit de fond. Ne pas commencer les analyses avant que le bruit de fond soit dans les limites indiquées.

Procédures de calibration et vérification de la calibration

La calibration de l'instrument devra être vérifiée dans les conditions suivantes :

1. après l'installation
2. au moins semestriellement (ou selon les recommandations du fabricant)
3. après une réparation importante ou un changement important (remplacement de pièces critiques qui peuvent influencer les performances de l'instrument, la mise à jour de logiciel, le changement complet des réactifs)
4. quand les données du contrôle de qualité reflètent un changement crucial d'exactitude (drift) ou les valeurs du contrôle hors limites
5. en cas de remplacement du réactif Hemolynac-3 avec le réactif Hemolynac-3N ou vice versa

La procédure de calibration devra être précédée par un entretien préventif (vérification d'exactitude et de précision : réf. document H26-A2 du protocole CLSI). La procédure de calibration devra être effectuée en utilisant le matériel approprié (échantillons frais de sang total qui ont été analysés par des méthodes de référence, ou calibrant approprié), suivant les prescriptions du Manuel d'utilisation. Quand la calibration est exigée, vérifier le calibrage de l'instrument juste après la calibration, selon les instructions du Manuel d'utilisation (pour information se référer également au document H26-A2 du protocole CLSI).

Procédures Quotidiennes de Contrôle de qualité

Afin d'assurer l'exactitude et la fiabilité des résultats, il est recommandé d'exécuter les procédures de contrôle de qualité, selon les instructions du Manuel d'utilisation et en utilisant le matériel approprié (échantillons frais de sang total qui ont été analysés par des méthodes de référence, ou sangs de contrôle préconisés par le fabricant). Il est recommandé d'utiliser deux niveaux différents de sang de contrôle stabilisé (se référer au document CLSI H26-A2).

**BIBLIOGRAPHIE**

1. Validation, Verification, and Quality Assurance of Automated Hematology Analyzers; Approved Standard – Second Edition, CLSI Document H26-A2, Vol. 30, No. 14, 2010.
2. Health Care Financing Administration. Clinical Laboratory Improvement Amendments of 1998 ; Final Rule. Federal Register, Vol. 57, [42 CFR §493.1217, 493.1218], 1992.

Date de publication : 4 janvier 2017



**Русский**

**ИДЕНТИФИКАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ**

Наименование: Изотонак 3, Изотонак 4, Хемолинак 3, Хемолинак 3N, Хемолинак 5, Хемолинак 310, Хемолинак 510, Клинак 3, Клинак, Клинак 710.

**ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ**

Только для диагностики in vitro. Реагенты предназначены для применения с анализаторами NIHON KOHDEN в различных сочетаниях, как указано в Таблице 1. Изотонак 4, Хемолинак 310, Хемолинак 510 и Клинак 710 предназначены исключительно для человеческой крови. Назначение реагентов см. в Таблице 2.

**УСЛОВИЯ И СРОК ХРАНЕНИЯ ПОСЛЕ ВСКРЫТИЯ УПАКОВКИ**

Хранить при температуре от 1 до 30 °C. Перед использованием в устройстве проверить целостность реагента и срок годности. После вскрытия упаковки реагент необходимо использовать до срока годности, указанного в Таблице 4. Когда любой из реагентов, за исключением Хемолинак 310, Хемолинак 510 и Клинак 710, не используется, для закупорки контейнера используйте оригинальный колпачок. Закрывая контейнер, не прикладывайте излишнее усилие.

**СОСТАВ**

Активные компоненты

Спр. Табл. 3

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

Информация о маркировке

См. Табл.5.

Информация об утилизации

Неиспользованный продукт и пустые контейнеры необходимо утилизировать в соответствии с местными экологическими нормами. Отходы, связанные с анализатором, несут потенциальную биологическую опасность. Необходимо соблюдать осторожность при работе с ними и утилизировать их в соответствии с местными экологическими нормами.

**ОБРАЗЦЫ**

Анализаторы разрабатываются для работы с образцами цельной крови. Информация о взятии образцов и условиях хранения представлена в Руководстве оператора.

**ПРОЦЕДУРА**

Информация о загрузке реагентов и первичной обработке, а также о работе с анализатором представлена в Руководстве оператора. При загрузке новой партии разбавителя или лизирующего реагента проверьте основные показатели в соответствии с указаниями Руководства оператора. Информация о диапазоне рабочих температур представлена в Руководстве оператора.

Используйте реагент в оригинальной упаковке (не переносите в другую упаковку). Следуйте рекомендациям, входящим в Надлежащую лабораторную практику. Если соединения прибора не совпадают герметичным образом, действуйте в соответствии с Надлежащей лабораторной практикой, чтобы избежать попадания любых загрязнений как из окружающей среды в устройство, так и из устройства в окружающую среду.

**МЕТОДОЛОГИЯ И РАСЧЕТ АНАЛИТИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ.**

Информация по методологии и расчету аналитических результатов представлена в Руководстве оператора.

**ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА**

Проверка расчета основных показателей

Перед анализом образцов проверьте фоновые значения основных параметров в соответствии с Руководством оператора, а также убедитесь, что значения каждого параметра входят в диапазон допустимых значений, обозначенный в Руководстве оператора. Если значения параметров не являются допустимыми, следуйте указаниям Руководства оператора. В случае возникновения проблем, связанных только с одним реагентом, загрузите новую порцию реагента и снова проверьте фоновые значения. Не проводите анализ образцов до тех пор, пока фоновые значения не будут приведены в обозначенные пределы.

Процедуры калибровки и проверки калибровки

Проверку калибровки прибора необходимо проводить в следующих случаях:

1. После первой установки.
2. Не реже одного раза в шесть месяцев (или в соответствии с требованиями производителя к частоте калибровки, если они являются более строгими).
3. После капитального ремонта или внесения значительных изменений в прибор (замена критически важных деталей, которая может повлиять на обработку образцов, обновление программного обеспечения, полная замена реагентов).
4. Когда данные контроля качества показывают значительное изменение базовой точности (отклонение) или состояние выхода за пределы допустимых значений.
5. В случае замены лизирующего реагента Хемолинак 3 на лизирующий реагент Хемолинак 3N и наоборот.

Перед калибровкой необходимо провести профилактическое техническое обслуживание (проверка базовой точности и прецизионности: ссылаться на документ CLSI H26-A2). Процедуры калибровки и проверки калибровки должны проводиться на основании надлежащего калибровочного материала (свежие образцы цельной крови, проанализированные с помощью эталонного метода или подходящего калибратора) в соответствии с указаниями Руководства оператора. Если требуется калибровка устройства, проверяйте качество калибровки незамедлительно после завершения процедуры калибровки в соответствии с указаниями Руководства оператора (ссылаться на документ CLSI H26-A2).

Ежедневные процедуры контроля качества

Для обеспечения точности и достоверности результатов анализа рекомендуется проводить процедуры контроля качества, описанные в Руководстве оператора с использованием надлежащего контрольного материала (архивные образцы, взятые у пациента, или стабилизированная контрольная кровь), непосредственно перед, во время или сразу после каждого цикла анализа (цикл понимается как последовательность анализов). Рекомендуется использование двух различных контрольных уровней стабилизированной крови (ссылаться на документ CLSI H26-A2).

**СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ**

1. Validation, Verification, and Quality Assurance of Automated Hematology Analyzers; Approved Standard – Second Edition, CLSI Document H26-A2, Vol. 30, No. 14, 2010.
2. Health Care Financing Administration. Clinical Laboratory Improvement Amendments of 1998; Final Rule. Federal Register, Vol. 57, [42 CFR § 493.1217, 493.1218], 1992.

Дата выпуска: 4 января 2017 г.



# Isotonac-3, Isotonac-4, Hemolynac-3, Hemolynac-3N, Hemolynac-5, Hemolynac-310, Hemolynac-510 Cleanac-3, Cleanac, Cleanac-710

## PORTUGUÊS

### IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Nome: Isotonac-3, Isotonac-4, Hemolynac-3, Hemolynac-3N, Hemolynac-5, Hemolynac-310, Hemolynac-510, Cleanac-3, Cleanac, Cleanac-710

### USO PRETENDIDO

Apenas para uso em diagnóstico in vitro. Os reagentes a serem usados em combinação no analisador NIHON KOHDEN são indicados na Tabela 1. Isotonac-4, Hemolynac-310, Hemolynac-510 e Cleanac-710 foram concebidos para uso apenas em sangue humano. Quanto ao uso pretendido, consulte a Tabela 2.

### ARMAZENAMENTO E PRAZO DE VALIDADE APÓS SER ABERTO

Armazene entre 1 e 30 °C. Consulte a integridade da data de validade do reagente antes de instalar o dispositivo. Após aberto, o reagente deve ser usado dentro do prazo de validade indicado na Tabela 4. Quando não estiver em uso, use a tampa original e feche o contêiner, exceto nos seguintes casos: Hemolynac-310, Hemolynac-510 e Cleanac-710. Não force.

### COMPOSIÇÃO

Ingredientes ativos

Ref. Tab 3.

### AVISOS E PRECAUÇÕES

Informações sobre as etiquetas

Ref. Tabela 5.

Informações de eliminação

O produto não utilizado e os recipientes vazios devem ser eliminados de acordo com os regulamentos ambientais locais. Os resíduos dos instrumentos, sendo potencialmente nocivos, têm de ser manuseados com cuidado e eliminados de acordo com os regulamentos ambientais locais.

### AMOSTRA

Os dispositivos foram concebidos para serem utilizados com amostras de sangue. Consulte o Manual do Operador para obter informações sobre a colheita de amostras e condições de armazenamento.

### PROCEDIMENTO

Consulte o Manual do Operador para obter informações sobre a colocação e a preparação de reagentes, bem como sobre o funcionamento do instrumento. Ao instalar um novo lote de diluente ou reagente de lise, verifique o processamento de contagem de fundo consoante o Manual do Operador. Consulte o Manual do Operador para obter informações sobre a temperatura de funcionamento.

Utilize cada reagente na respectiva embalagem (não transfira). Siga as recomendações BPL. Se as ligações do instrumento não forem compatíveis, proceda de acordo com as boas práticas de laboratório (BPL), para evitar qualquer tipo de contaminação, de um ambiente externo para o dispositivo ou do dispositivo para o ambiente externo.

### METODOLOGIA E CÁLCULO DE RESULTADOS ANALÍTICOS

Consulte o Manual do Operador para obter informações sobre a metodologia e o cálculo de resultados analíticos.

### CONTROLO DE QUALIDADE INTERNO

Verificação do processamento de contagem de fundo

Antes de processar amostras de teste, verifique a contagem do processamento de contagem de fundo de acordo com o Manual do Operador e confirme que todos os valores de cada parâmetro estão dentro dos limites indicados no Manual do Operador. Caso contrário, siga as indicações do Manual do Operador. Caso ocorra algum problema com um dos reagentes, instale uma nova unidade de reagente e verifique novamente o processamento de contagem de fundo. Não processe amostras de teste até que o processamento de contagem de fundo esteja dentro dos limites especificados.

Calibração e procedimentos de verificação de calibração

A calibração do instrumento deve ser verificada nas seguintes condições:

1. após a primeira instalação
2. a cada seis meses, no mínimo (ou de acordo com os requisitos do fabricante relativos à frequência de calibração, caso sejam mais rigorosos)
3. após uma reparação ou alteração mais significativa (substituição de peças essenciais, que podem influenciar o desempenho dos testes, actualização de software, mudança completa dos reagentes)
4. quando os dados do controlo de qualidade reflectem uma alteração significativa da precisão da linha de base (desvio) ou uma condição fora do controlo
5. Em caso de substituição do reagente de lise Hemolynac-3 pelo reagente de lise Hemolynac-3N e vice versa

Os procedimentos de calibração devem ser precedidos por uma manutenção preventiva (verificação da precisão da linha de base e precisão: ref. documento CLSI H26-A2). A calibração e a verificação da calibração têm de ser executadas utilizando material de calibração adequado (amostras de sangue total recém-colhidas que foram analisadas por métodos de referência ou calibrador apropriado), de acordo com as indicações do Manual do Operador. Quando for necessário realizar a calibração, verifique a calibração do instrumento imediatamente após a calibração, de acordo com as instruções do Manual do Operador (consulte o documento CLSI H26-A2).

Procedimentos diários de controlo de qualidade

Para assegurar a precisão e fiabilidade dos resultados de teste, é recomendável executar procedimentos de controlo de qualidade, em conformidade com o Manual do Operador, utilizando material de controlo apropriado (amostras de paciente conservadas ou sangue de controlo estabilizado), imediatamente antes, durante ou imediatamente depois de cada análise (prevista como uma sequência de análise). Aconselha-se a utilização de dois níveis diferentes de sangue de controlo estabilizado (consultar o documento CLSI H26-A2)

### BIBLIOGRAFIA

1. Validation, Verification, and Quality Assurance of Automated Hematology Analyzers; Approved Standard – Second Edition, CLSI Document H26-A2, Vol. 30, No. 14, 2010.
2. Health Care Financing Administration. Clinical Laboratory Improvement Amendments of 1998; Final Rule. Federal Register, Vol. 57, [42 CFR § 493.1217, 493.1218], 1992.

Data de publicação: 4 de janeiro de 2017



NIHON KOHDEN FIRENZE S.r.l

Via Torta, 72/74 - 50019 Sesto Fiorentino-Firenze, Italy  
Tel +39 055 3045 1 - Fax +39 055 308548




SIMBOLI/SYMBOLS/SIMBOLOS/SYMBOLS/SYMBOLS/ОБОЗНАЧЕНИЯ/SÍMBOLOS



Consultare le istruzioni operative  
Consult operating instructions las  
instrucciones operativas  
Consultar In den Gebrauchsanweisungen nachschlagen  
Consulter les instructions d'utilisation  
См. инструкции по эксплуатации  
Consultar as instruções de funcionamento



Tenere al riparo dalla luce  
Keep away from sunlight  
Mantener reparado de la luz  
Dunkel aufbewahren  
Conserver à l'abri de la lumière du soleil  
Беречь от попадания солнечных лучей  
Manter afastado da luz solar

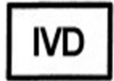

Dispositivo diagnostico in vitro  
In vitro diagnostic medical device  
Dispositivo diagnóstico in vitro  
In-vitro-Diagnostikum  
Dispositif médical de diagnostic in vitro  
Медицинское изделие для диагностики In vitro  
Dispositivo médico de diagnóstico In vitro



Non usare ganci  
Use no hooks  
No usar ganchos  
Keine Haken verwenden  
N'utiliser aucun crochet  
Не использовать крюки  
Não utilizar ganchos



Utilizzare entro  
Use by  
Utilizar antes de  
Verwendbar bis  
Utiliser avant  
Использовать до  
Utilizar até



e.g.) five-stack

Limiti di impilamento  
Stacking limitation  
Límites de apilado  
Maximale Stapelhöhe  
Limitation d'empilement  
Ограничение по штабелированию  
Limite de empilhamento



Lotto  
Batch code  
Lote  
Lot-Nr.  
Code du lot  
Код партии  
Código de lote



Teme l'umidità  
Keep dry  
Teme la humedad  
Vor Feuchtigkeit schützen  
 Craint l'humidité  
Беречь от влаги  
Manter seco



Codice  
Catalogue number  
Código  
Kenn-Nr.  
Numéro de référence  
Номер в каталоге  
Número de catálogo



Alto  
This way up  
Arriba  
Oben  
Sens du chargement  
Верх  
Para cima



Fabbricante  
Manufacturer  
Fabricante  
Hersteller  
Fabricant  
Изготовитель  
Fabricante



Limite di temperatura  
Temperature limitation  
Límite de temperatura  
Temperaturgrenzwerte  
Limites de température  
Ограничение по температуре  
Limite de temperatura



Fragile, maneggiare con cura  
Fragile, handle with care  
Frágil, manipular con cuidado  
Vorsicht zerbrechlich  
Fragile, manipuler avec soin  
Хрупкое, обращаться осторожно  
Frágil, manusear com cuidado





**Isotonac-3, Isotonac-4, Hemolynac-3, Hemolynac-3N, Hemolynac-5, Hemolynac-310, Hemolynac-510  
Cleanac-3, Cleanac, Cleanac-710**

TABELLE/TABLES/TABLAS/TABELLEN/TABLEAUX/ТАБЛИЦЫ/TABELAS

Tabella/Table/Tabla/Tabelle/Tableau/Таблица/Tabela 1

| <b>reagenti/reagents<br/>reactivos/Reagenzmittel/réactifs<br/>реагенты/reagentes</b> |           |  |  | <b>strumenti/instruments/instrumentos<br/>Geräte/instruments<br/>анализаторы/ instrumentos</b> |         |   |                    |         |      |
|--|-----------|--|--|--|---------|---|--------------------|---------|------|
| nome/name<br>nombre/Name<br>nom<br>наименование<br>nome                              | REF       | descrizione/description<br>descripción/Beschreibung<br>description/описание<br>descrição                         | unità di vendita/packaging<br>unidades de<br>venta/handelsübliche<br>Packungsgröße/unités de vente<br>упаковка/embalagem | Nihon Kohden MEK-  |         |   |                    |         |      |
|  |           |  |  | 8118K  | 6318J/K | 6400J/K<br>6410J/K<br>6420J/K<br>6500J/K<br>6510J/K | 8222J/K<br>7222J/K | 7300J/K | 9100 |
| Isotonac-3   | MEK-640 I | diluente/diluent/diluyente/<br>Verdünnungsmittel/diluent/<br>разбавитель/diluyente                               | 20 L   | ✓  | ✓       | ✓   | ✓                  | ✓       | ✓    |
| Isotonac-4   | MEK-641 I |  | 20 L   | ✓  | ✓       | ✓   | ✓                  | ✓       | ✓    |
| Hemolynac-3  | MEK-660 I | lisante/lysing<br>reagent/lixante/Lösungsmittel/<br>agent de lyse/лизирующий<br>реагент/ reagente de lise        | 1 L  | ✓  | ✓       |   | ✓                  |         |      |
| Hemolynac-3N   | MEK-680 I |  | 1 L  |  | ✓ *     | ✓   | ✓ *                | ✓       |      |
| Hemolynac-5  | MEK-910 I |  | 1 L  |  |         |   | ✓                  | ✓       |      |
| Hemolynac-310  | MK-310WI  |  | 250 ml   |  |         |   |                    |         | ✓    |
| Hemolynac-510  | MK-510WI  |  | 250 ml   |  |         |   |                    |         | ✓    |
| Cleanac-3  | MEK-620 I | detergente/detergent/detergente/<br>Reinigungsmittel/agent de<br>nettoyage/моющее средство/<br>agente de limpeza | 1 L  | ✓  | ✓ **    | ✓ ****  | ✓                  | ✓       |      |
| Cleanac  | MEK-520 I |  | 5 L  |  | ✓ ***   | ✓   | ✓                  | ✓       |      |
| Cleanac-710  | MK-710WI  |  | 3 L  |  |         |   |                    |         | ✓    |

\* reagente alternativo a/alternative reagent for/reactivo alternativo a/Reagenzmittel-Alternative zu/réactif alternatif à/заменяющий реагент для реагента/ reagente alternativo Hemolynac-3 (MEK-660 I)

\*\* con/with/con/mit/avec/c реагентом/com Hemolynac-3 (MEK-660 I)

\*\*\* con/with/con/mit/avec/c реагентом/com Hemolynac-3N (MEK-680 I)

\*\*\*\* per una pulizia intensiva/for strong cleaning/para la limpieza intensiva/für eine Intensivreinigung/pour le nettoyage intensif/для усиленной очистки/para limpeza intensiva

Tabella/Table/Tabla/Tabelle/Tableau/Таблица/Tabela 2

| <b>reagenti/reagents<br/>reactivos/Reagenzmittel<br/>réactifs/реагенты/ reagentes</b> |           | <b>destinato per/Intended for/destinado a<br/>bestimmt für/destiné à<br/>назначение/ Destinado a</b>   |  |
|---|-----------|--|--|
| nome/name<br>Nombre/Name<br>nom<br>наименование<br>nome                               | REF       | diagnostica in vitro (umano)<br>in vitro diagnostic (human)<br>para diagnóstico <i>in vitro</i> (humano)<br>In-vitro-Diagnostik (Mensch)<br>diagnostic in vitro (humains)<br>диагностика in vitro (человек)<br>diagnóstico in vitro (humano) | analisi veterinarie (animali)<br>veterinary analysis (animal)<br>análisis veterinarios (animales)<br>Veterinärdiagnostik (Tier)<br>analyses vétérinaires (animaux)<br>ветеринарный анализ (животные)<br>análise veterinária (animal) |
| Isotonac-3  | MEK-640 I | ✓  | ✓  |
| Isotonac-4  | MEK-641 I | ✓*   | N/A  |
| Hemolynac-3   | MEK-660 I | ✓  | ✓  |
| Hemolynac-3N  | MEK-680 I | ✓  | ✓  |
| Hemolynac-5   | MEK-910 I | ✓  | ✓  |
| Hemolynac-310   | MK-310WI  | ✓  | N/A  |
| Hemolynac-510   | MK-510WI  | ✓  | N/A  |
| Cleanac-3   | MEK-620 I | ✓  | ✓  |
| Cleanac   | MEK-520 I | ✓  | ✓  |
| Cleanac-710   | MK-710WI  | ✓  | N/A  |

\* Isotonac-4 non deve essere utilizzato per le analisi veterinarie/Isotonac-4 must not be used for veterinary analysis

Isotonac-4 no debe utilizarea para análisis veterinarios/Isotonac-4 darf nicht für die Veterinärdiagnostik verwendet werden

Isotonac-4 ne doit pas être utilisé pour des analyses vétérinaires/Изотонак-4 не используется для проведения ветеринарных анализов

Isotonac-4 não pode ser utilizado para análise veterinária



**Isotonac-3, Isotonac-4, Hemolynac-3, Hemolynac-3N, Hemolynac-5, Hemolynac-310, Hemolynac-510  
Cleanac-3, Cleanac, Cleanac-710**

Tabella/Table/Tabla/Tabelle/Tableau/Таблица/Tabela 3

| <i>reagenti/reagents<br/>reactivos/Reagenzmittel<br/>réactifs/реагенты<br/>reagentes</i> |            | <i>ingredienti attivi/active ingredients<br/>ingredientes activos/wirksame Bestandteile<br/>ingrédients actifs/активные компоненты<br/>principios activos</i>   |  |
|--|------------|---|--|
| nome/name<br>nombre/Name<br>nom<br>наименование<br>nome                                  | <b>REF</b> | nome/name<br>nombre/Name<br>nom<br>наименование<br>nome   | contenuto/content<br>contendo/Inhalt<br>contenu/состав<br>conteúdo |
| Isotonac-3   | MEK-640 I  | Sodio cloruro/Sodium chloride/Cloruro de sodio<br>Natriumchlorid Chlorure de sodium/Хлорид натрия Cloreto de sódio  | 4,4 g/L  |
|  |            | Sodio solfato anidro/Sodium sulphate anhydrous/Sulfato de sodio anhidro/Natriumsulfat wasserfrei Sulfate de sodium anhydre/Сульфат натрия безводный/Sulfato de sódio anidro   | 9,7 g/L  |
| Isotonac-4   | MEK-641 I  | Sodio cloruro/Sodium chloride<br>Cloruro de sodio/Natriumchlorid<br>Chlorure de sodium/Хлорид натрия<br>Cloreto de sódio  | 4,0 g/L  |
|  |            | Sodio solfato anidro/Sodium sulphate anhydrous<br>Sulfato de sodio anhidro/Natriumsulfat wasserfrei<br>Sulfate de sodium anhydre/Сульфат натрия<br>безводный/Sulfato de sódio anidro  | 9,8 g/L  |
| Hemolynac-3  | MEK-660 I  | Sali di ammonio quaternario/Quaternary ammonium salts<br>Sales cuaternarias de amonio/Quartäre Ammoniumverbindung<br>Sels d'ammonium quaternaire/Четвертичные аммониевые соли/Sais de amónio quaternário  | 37,2 g/L   |
|  |            | Potassio cianuro/Potassium cyanide<br>Cianuro de potasio/Kaliumcyanid<br>Cyanure de potassium/Цианид калия<br>Cianeto de potássio   | 0,4 g/L  |
| Hemolynac-3N   | MEK-680 I  | Sali di ammonio quaternario/Quaternary ammonium salts<br>Sales cuaternarias de amonio/Quartäre Ammoniumverbindung<br>Sels d'ammonium quaternaire/Четвертичные аммониевые соли<br>Sais de amónio quaternário   | 37,2 g/L   |
| Hemolynac-310  | MK-310WI   | Sali di ammonio quaternario/Quaternary ammonium salts<br>Sales cuaternarias de amonio/Quartäre Ammoniumverbindung<br>Sels d'ammonium quaternaire/Четвертичные аммониевые соли<br>Sais de amónio quaternário   | 27,0 g/L   |
| Hemolynac-510  | MK-510WI   | Sodio alchilettere solfato/Sodium alkyl ether sulphate Alquil éter sulfato de sodio/Natriumalkylethersulfat Alkyl éther sulfate de sodium/Алкилэфир сульфата натрия/Alquil éter sulfato de sódio  | 1 g/L  |
| Hemolynac-5  | MEK-910 I  | Sodio alchilettere solfato/Sodium alkyl ether sulphate<br>Alquil éter sulfato de sodio/Natriumalkylethersulfat<br>Alkyl éther sulfate de sodium/Алкилэфир сульфата<br>натрия/Alquil éter sulfato de sódio   | 1 g/L  |
| Cleanac-3  | MEK-620 I  | Ipcloclorito di sodio (% cloro attivo)/Sodium hypochlorite (% active chlorine)<br>Hipoclorito de sodio (% cloro 10ctive)/Natriumhypochlorit (% Cl aktiv)<br>Hypochlorite de sodium (% Cl actif)/Гипохлорит натрия (% активного хлора)/Hipocloreto de sódio (% de cloro 10ctive) | 1 – 1,5 %<br>p/v – w/v<br>p/v – w/v<br>p/v                         |
| Cleanac  | MEK-520 I  | Poliossietilen tridecil etere/Polyoxyethylene tridecyl ether<br>Eter tridecílico polioxi-etilenado/Isotridecanol, ethoxyliert<br>Tridécyl éther ou Polyoxuéthylène<br>Полиоксиэтилен тридециловый эфир/Éter tridecílico de polioxi-etileno                                      | 0,5 g/L  |
| Cleanac-710  | MK-710WI   | Sodio alchilettere solfato/Sodium alkyl ether sulphate<br>Alquil éter sulfato de sodio/Natriumalkylethersulfat Alkyl éther sulfate de sodium/Алкилэфир сульфата<br>натрия/Alquil éter sulfato de sódio  | 0,7 g/L  |



Tabella/Table/Tabla/Tabelle/Tableau/Таблица/Tabela 4

| <i>reagenti/reagents<br/>reactivos/Reagenzmittel<br/>réactifs/реагенты<br/>reagentes</i> |            | <i>scadenza dopo prima apertura/expiry after first opening<br/>caducidad tras la primera apertura/nach dem ersten Öffnen mindestens haltbar für<br/>expiration après ouverture/срок годности после вскрытия упаковки<br/>validade após a primeira abertura</i> |      |
|--|------------|--|------|
| <i>nome/name<br/>nombre/Name<br/>nom<br/>наименование<br/>nome</i>                       | <b>REF</b> | <i>giorni/days<br/>días/Tage<br/>jours<br/>дни/dias</i>  |      |
| Isotonac-3   | MEK-640 I  | 60   |      |
| Isotonac-4   | MEK-641 I  | 60   |      |
| Hemolynac-3  | MEK-660 I  | 30   |      |
| Hemolynac-3N   | MEK-680 I  | 90   |      |
| Hemolynac-5  | MEK-910 I  | 30   |      |
| Hemolynac-310  | MK-310WI   | 90   |      |
| Hemolynac-510  | MK-510WI   | 90   |      |
| Cleanac-3  | MEK-620 I  | 90*  | 30** |
| Cleanac  | MEK-520 I  | 180  |      |
| Cleanac-710  | MK-710WI   | 90   |      |

\* Cleanac-3 può essere utilizzato con scadenza a 90 giorni dopo prima apertura mediante l'utilizzo del kit di allaccio codice YZ-001B7 (T464D) a partire dal lotto 0000783360 AB compreso e con bottiglia tenuta all'interno dell'originale scatola in cartone/Cleanac-3 can be used for 90 days after first opening, only with the tube assay YZ-001B7 (T464D) starting from LOT 0000783360 AB and subsequent lots and kept in the original carton box/Cleanac-3 puede usarse durante 90 días una vez abierto, únicamente con el tubo de ensayo YZ-001B7 (T464D) desde el LOTE 0000783360 AB y los lotes siguientes, conservándolo en la caja de cartón original/Cleanac-3 kann nach erstmaligem Öffnen 90 Tage lang verwendet werden, sofern es im Originalkarton verbleibt und der Verbindungsschlauch YZ-001B7 (T464D) ab einschließl. LOT 0000783360 AB und höher benutzt wird/Cleanac-3 peut être utilisé pendant 90 jours après sa première ouverture, uniquement avec le tube de dosage YZ-001B7 (T464D) à partir de LOT 0000783360 AB, ainsi que les lots suivants conservés dans la boîte en carton d'origine/Cleanac-3 можно использовать в течение 90 дней после вскрытия упаковки только с пробиркой для анализов YZ-001B7 (T464D) начиная с ПАРТИИ 0000783360 AB и последующих партий. Средство надлежит хранить в оригинальной картонной коробке/Pode utilizar o Cleanac-3 durante 90 dias após a primeira abertura, apenas com o conjunto de tubo YZ-001B7 (T464D) a partir do lote LOT 0000783360 AB e posteriores e mantido na caixa de cartão original.

\*\* Cleanac-3 viene utilizzato con scadenza a 30 giorni dopo prima apertura mediante l'utilizzo del kit di allaccio codice YZ-001B7 (T464D) con lotti precedenti al lotto 0000783360 AB escluso/Cleanac-3 is used for 30 days after first opening with the tube assay YZ-001B7 (T464D) with previous LOT 0000783360 AB/Cleanac-3 puede usarse durante 30 días una vez abierto, con el tubo de ensayo YZ-001B7 (T464D) con el anterior LOTE 0000783360 AB/Cleanac-3 kann nach erstmaligem Öffnen 30 Tage lang verwendet werden, falls der Verbindungsschlauch YZ-001B7 (T464D) bis LOT 0000783360 AB benutzt wird/Cleanac-3 s'utilise pendant 30 jours après sa première ouverture avec le tube de dosage YZ-001B7 (T464D) avec les lots précédant LOT 0000783360 AB/Cleanac-3 надлежит использовать в течение 30 дней после вскрытия упаковки с пробиркой для анализов YZ-001B7 (T464D) с предыдущей ПАРТИЕЙ 0000783360 AB/O Cleanac-3 é utilizado 30 dias após a primeira abertura, com o conjunto de tubo YZ-001B7 (T464D) e com o lote anterior LOT 783360 AB.

Tabella/Table/Tabla/Tabelle/Tableau/Таблица/Tabela 5

| <i>nome/name<br/>nombre/Name<br/>nom<br/>наименование<br/>nome</i>   | <b>REF</b>   | <i>informazioni sull'etichettatura/information on labelling<br/>informaciones en las etiquetas/Informationen zur Etikettierung<br/>information sur l'étiquetage/информация о маркировке<br/>informações sobre etiquetas</i>   |
|--|--|---|
| Isotonac-3<br>Isotonac-4<br>Hemolynac-3<br>Hemolynac-3N<br>Hemolynac-5<br>Hemolynac-310<br>Hemolynac-510<br>Cleanac<br>Cleanac-710 | MEK-640 I<br>MEK-641 I<br>MEK-660 I<br>MEK-680 I<br>MEK-910 I<br>MK-310WI<br>MK-510WI<br>MEK-520 I<br>MK-710WI | Etichetta di pericolo ai sensi del regolamento 1272/2008 (CLP) non richiesta come da art. 1,5,d) CLP<br>No hazard label required according to 1272/2008 regulation (CLP) art. 1,5,d)<br>No se requiere etiqueta de peligro según el artículo 1,5,d) del reglamento 1272/2008 (CLP)<br>Gefahrenkennzeichnung gemäß Verordnung 1272/2008 (CLP) nicht erforderlich gemäß Art. 1,5,d) CLP<br>L'étiquette de danger conformément au règlement 1272/2008 (CLP) n'est pas requise aux termes de l'article 1,5,d) du CLP<br>знак опасности не требуется согласно регламенту 1272/2008 (CLP) ст. 1,5,d)<br>Rótulo de perigo nos termos do regulamento 1272/2008 (CLP) não exigido, como consta do art. 1,5,d) (CLP)  |
| Cleanac-3  | MEK-620 I  | Etichetta di pericolo ai sensi del regolamento 1272/2008 (CLP) non richiesta come da art. 1,5,d) CLP. Ingredienti attivi: Ipoclorito di Sodio (%Cl Attivo) 1-1,5%p/v) NON mescolare con acidi – Etichettatura per il trasporto: UN 1791 PG III – Hypochlorite solution in limited quantity<br>No se requiere etiqueta de peligro según el artículo 1,5,d) del reglamento 1272/2008 (CLP). Ingredientes activos: hipoclorito de sodio (%Cl activo) 1-1,5% p/v). NO mezclar con ácidos – Etiqueta para el transporte: UN 1791 PG III. Solución de hipoclorito en cantidad limitada<br>Gefahrenkennzeichnung gemäß Verordnung 1272/2008 (CLP) nicht erforderlich gemäß Art. 1,5,d) CLP. Wirkstoffe: Natriumhypochlorit (% aktives Cl) 1-1,5 % w/v. NICHT mit Säure mischen – Transportkennzeichnung: UN 1791 PG III – Hypochloritlösung in begrenzter Menge<br>L'étiquette de danger conformément au règlement 1272/2008 (CLP) n'est pas requise aux termes de l'article 1,5,d) du CLP. Ingrédients actifs : Hypochlorite de sodium (% Cl actif) 1-1,5 % p/v – NE PAS mélanger avec des acides. Étiquetage pour le transport : UN 1791 PG III – Solution d'hypochlorite en quantité limitée<br>знак опасности не требуется согласно регламенту 1272/2008 (CLP) ст. 1,5,d). Активный состав: Гипохлорит натрия (%Cl активный) 1-1,5% w/v. НЕ смешивать с кислотами – Маркировка для перевозки: UN 1791 PG III – Гипохлорит натрия в ограниченном количестве<br>Rótulo de perigo nos termos do regulamento 1272/2008 (CLP) não exigido, como consta do art. 1,5,d) (CLP). Ingredientes ativos: Hipoclorito de Sódio (%Cl Ativo) 1-1,5%p/v) NÃO misturar com ácidos – Rotulagem para o transporte: UN 1791 PG III – Solução de hipoclorito em quantidades reduzidas |

